

Beschrijving Tekenkaart/Safecard*

De tekenkaart / safecard* is de enige echte en gepatenteerde tekenkaart. De tekenkaart is een speciale kunststofkaart zo groot als een pinpas met een grote inkeping voor de teek, die buigzaam is, en een kleine inkeping voor de nog kleine teek (nimpf) en bijenangels.

De tekenpas is in samenwerking met gespecialiseerde artsen zó ontwikkeld dat de teek de minste weerstand voelt en bijna geen kans heeft om zijn gif te spuiten.

Met een simpele, snelle beweging schuift u de tekenkaart onder de teek en zo verder in een glijdende beweging, zodat u de teek uit de huid schuift, waardoor de teek de minste kans heeft om zijn gif achter te laten ter voorkoming van de ziekte Lyme.

Noteer de plek waar de teek gebeten heeft en noteer de datum. Controleer de bijtplek regelmatig of raadpleeg bij twijfel de huisarts. De teek kan nl. de borrelia-bacterie bij zich dragen waardoor de ziekte van Lyme het gevolg kan zijn.

Wereldwijd zijn er een paar miljoen tekenkaarten model SAFECARD verkocht.


De tekenpas past in uw portemonnee en is klaar voor gebruik voor uzelf, maar ook voor anderen.



Hoe de tekenkaart / Safecard* te gebruiken?

De tekenkaart werkt heel simpel. Pak de tekenkaart uit uw portemonnee als u een teek ziet bij een mens of dier. De teek kan dan het snelst verwijderd worden. Probeer geen andere middeltjes of instrumenten zoals de tekentang, tekenlepel o.i.d. of smeersels. Dat kan de teek irriteren.

- Blijf rustig en maak de omgeving van de teek zo vrij mogelijk.
- De tekenkaart zo dichtbij mogelijk bij teek plaatsen.
- Langzaam met een glijdende beweging onder te teek schuiven en blijven schuiven.
- De teek zal loskomen en vast zitten in de inkeping van de tekenkaart.
- Indien mogelijk de tekenbeet ontsmetten met alcohol.
- De datum van de beet noteren, waar u gebeten bent en omgeving waar de teek u beet.
- Bij ziekte of misselijkheid, duizeligheid de arts raadplegen.

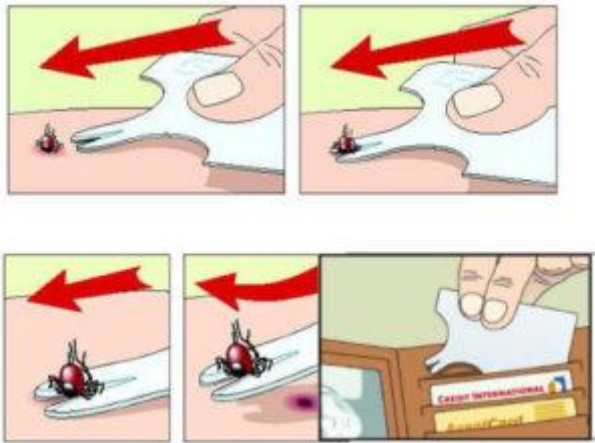

Waarom de tekenkaart / Safecard gebruiken?

- Omdat de tekenkaart safecard de meest efficiënte tekenverwijderaar is.
- Zelfs kinderen kunnen de teek verwijderen met deze tekenpas.
- Door het grote oppervlak is het een prima promotie artikel om uw reclame- boodschap op te bedrukken.
- Een echt perfect artikel dat al meer als een miljoen keer, wereldwijd, verkocht is.
- De tekenkaart, tekenverwijderaar wordt bedrukt in 1 kleur tot full color aan de voorzijde en aan de achterzijde kan de demo instructie gedrukt worden

Omschrijving Teken en de Ziekte van Lyme ([Bron tekenbeetziekten](#))

Een teek is een klein spinachtig diertje dat mens of dier bijt om bloed te zuigen. Ze kunnen een groot aantal ziektes overbrengen, waarvan de Ziekte van Lyme de bekendste is. Deze ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie *Borrelia burgdorferi* en kan, wanneer de ziekte niet tijdig behandeld wordt, ernstige en blijvende klachten veroorzaken. Veel teken in Nederland zijn met deze bacterie besmet, het percentage besmette teken varieert in de tijd en is mede afhankelijk van locatie, weer enz. Behalve *Borrelia* kan de teek andere zgn. co-infecties overbrengen die soms enigszins vergelijkbare klachten kunnen veroorzaken.

Wanneer u in het buitenland gebeten bent dient u alert te zijn op de daar voorkomende tekenbeetziekten. Dit kan afwijken van de situatie in Nederland en uw arts is hiervan mogelijk niet op de hoogte. Wanneer de teek langer dan 12-24 uur vast gezeten heeft in de huid neemt het risico op een besmetting met *Borrelia* aanzienlijk toe; u kunt echter binnen enkele uren al besmet raken. Op websites van overheid en medische instanties wordt vaak gesteld dat u binnen 24-48 uur vrijwel geen risico loopt, dit is onjuist! Het is met de beschikbare testen helaas niet mogelijk om direct na ontdekking van een tekenbeet te controleren of u besmet bent met de *Borrelia* bacterie. Het beste advies is om de beetplek goed in de gaten te houden en te letten op andere 'verdachte' ziekteverschijnselen:

– Bij ongeveer de helft van de met *Borrelia* besmette personen ontstaat op de huid op de plaats van de beet na een aantal dagen tot enkele weken een zgn. Erythema Migrans (EM), een opvallende rode ring / vlek die meestal in de loop van de tijd groter wordt. De typerende EM is (veel) groter dan 5 cm in doorsnee, heeft een opvallend rode kleur met een relatief lichter centrum. De plek kan jeuken, maar dit is lang niet altijd het geval. N.B.: een EM kan op allerlei punten zoals kleur, afmeting, vorm etc. afwijken van de 'standaard' EM. De EM kan gedurende enkele weken tot maanden zichtbaar blijven en verdwijnt vanzelf, ook zonder behandeling. Dat de EM verdwijnt is géén teken dat de besmetting/ziekte over is!! Bij mensen

met een donkere huidskleur is een EM moeilijker herkenbaar en lijkt het meer op een stootplek. Wanneer u een EM ziet of vermoedt, raadpleeg dan direct de huisarts. Indien er sprake is van een EM dient u direct een antibiotica behandeling te krijgen. Een EM is 100% bewijs voor besmetting met de Borrelia bacterie; een test voor controle op Lymeziekte is dan alleen zinvol als de arts twijfelt of de vlek een EM is (zie echter de opmerking verderop over diagnostische testen). Wanneer u geen EM ziet kunt u toch met Borrelia (of een andere ziekteverwekker) besmet zijn: in ongeveer de helft van de besmettingsgevallen wordt de EM niet gezien (of wellicht over het hoofd gezien).

Na een Borrelia besmetting ontstaan vaak binnen enkele weken griepachtige verschijnselen zoals koorts(-vlagen), vermoeidheid, hoofd-, keel- en gewrichtspijn. Wees daar dus bedacht op na een tekenbeet en raadpleeg zo nodig de huisarts. In een later stadium kunnen talrijke andere klachten ontstaan, het verloop van de ziekte kan per persoon sterk verschillen.

Hoe langer gewacht wordt met behandelen van de ziekte, hoe groter de kans dat de ziekte chronisch wordt en niet meer volledig te behandelen is. De standaard behandeling voor Lymeziekte is een antibiotica kuur van enkele weken. Er is onenigheid in medische kringen over wat de optimale behandeling is; een te korte of te laag gedoseerde antibiotica kuur vergroot het risico dat de ziekte niet afdoende behandeld wordt en na verloop van tijd terugkomt. Houdt bij verdachte symptomen na een tekenbeet altijd rekening met de mogelijkheid dat u (behalve met Borrelia) ook nog met andere ziekteverwekkers besmet kunt zijn.

Testen voor Ziekte van Lyme

Diagnose dient te gebeuren door een arts op basis van de symptomen (klachten) en NIET op basis van een bloedtest. De traditionele bloedtesten (Lyme Elisa/EIA en Immunoblot/Western Blot) zijn onbetrouwbaar, met name de eerste 6-8 weken na besmetting. Gemiddeld wordt met deze testen meer dan de helft van de besmettingen gemist (foutnegatieve uitslag: de test geeft ten onrechte aan dat u niet besmet bent). Een bloedtest kan ook een besmetting aangeven terwijl u in werkelijkheid niet (meer) besmet bent (fout-positieve uitslag). Er bestaan andere diagnostische testen die bepaalde voordelen hebben zoals Borrelia PCR en LTT; deze testen worden meestal niet vergoed en ze zullen ook niet altijd uitsluitend kunnen geven over de vraag of u wél of niet besmet bent. Het is mogelijk om de verwijderde teek op te sturen en te laten testen op besmetting met de Borrelia bacterie. Bedenk daarbij dat dit alleen een risico indicatie geeft, en géén zekerheid over een besmetting. Als de teek volgens de test niet besmet is zou het kunnen dat u nog door een andere teek gebeten bent die wél besmet was en die u niet gezien hebt, of dat de test onvoldoende gevoelig was om de (nog resterende) besmetting in de teek te meten. Als de teek wél besmet blijkt te zijn betekent dit nog niet dat de besmetting is overgebracht op de gebeten persoon en dat die ziek zal worden.

Tekenbeet voorkomen

Teken komen vrijwel overal voor in de natuur; niet alleen in bossen, duinen en landelijk gebied maar ook in parken en tuinen. Vooral de onvolwassen nimfen, formaat speldenknop, zijn in de praktijk een risico omdat ze talrijk zijn en makkelijk over het hoofd gezien worden. Ze zijn vooral relatief laag bij de grond te vinden, bijvoorbeeld in laag struikgewas of op de topjes van grashalmen. In een enkel geval kan een (volwassen) teek zich van bovenaf omlaag laten vallen op een voorbijkomende wandelaar. Teken zijn vrijwel het hele jaar actief, vooral bij temperaturen vanaf 5-7 °C en in relatief vochtige omstandigheden. Blijf in de natuur zoveel mogelijk op de paden en vermijd lang gras. Draag beschermende kleding: gesloten schoenen, broekspijpen in de sokken, shirt met lange mouwen etc. Voor kinderen of wanneer

u onder lage struiken etc. doorkruipt kan een petje extra bescherming bieden. Op lichtere kleding zijn teken vaak beter te zien.

Controleer direct na een wandeling in de natuur of na werken in de tuin uw huid en kleding zorgvuldig op teken. Dit gaat het makkelijkst met hulp van een huisgenoot. Teken hebben een voorkeur voor warme en vochtige plekken zoals knieholtes, oksels, liezen, achter de oren en nek/haarlijn. Controleer ook huisdieren op teken, voordat ze naar binnen gaan!

Let op: teken op kleding kunnen bij temperaturen van minder dan 60°C de wasmachine of wasdroger overleven.

Er bestaat speciale geïmpregneerde kleding die extra bescherming biedt tegen teken, verkrijgbaar in o.a. buitensport zaken. U kunt ook uw kleding en huid besproeien met een middel zoals DEET. Geen van deze middelen biedt volledige bescherming, het verkleint alleen het risico op een tekenbeet. Middelen zoals DEET zijn zelf niet ongevaarlijk (extra oppassen bij kinderen en zwangere vrouwen) en ze kunnen corrosief werken op plastics en lak van apparatuur. Informeer u dus goed voordat u hiervan gebruik maakt. Ook natuurlijke middelen zoals knoflook(tabletten) kunnen soms helpen om de kans op een tekenbeet te verkleinen.

Meer informatie

Er is op internet veel informatie te vinden over de Ziekte van Lyme en andere tekenbeetziekten. Veel informatie is tegenstrijdig en soms ten onrechte geruststellend of zelfs regelrecht misleidend (dit geldt ook voor informatie van de overheid en sommige medische instanties). Omdat er rondom tekenbeetziekten nog veel onbekend is en uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek regelmatig van dubieuze kwaliteit is zult u ook daar soms onbetrouwbare of tegenstrijdige informatie aantreffen

Bron: www.tekenbeetziekten.nl

Vertrouw op de kwaliteit en op de ervaring van experts en gebruik alleen de TEKENAART / SAFECARD*.

Koop geen plagiaat! U bent dan niet zeker van de kwaliteit.

Het is niet te hopen dat dan de inkeping breekt.

De teek wordt dan NIET verwijderd, maar wel geïrriteerd, waardoor de teek wel zijn gif kan loslaten.!!

Let op het merkbeeld SAFECARD* en op CE SAFECARD Aps DK8660 Skanderborg. Dit is uw garantie op kwaliteit.

U bent zeker van de kwaliteit van de tekenkaart / Safecard* en dat de teek zo veilig mogelijk verwijderd is.

SAFECARD



Staal Dekker en Ronday

Elektrotechniek

Beveiliging

Telematica

www.sdr.nl 020-5110880



SAFECARD AFS
DY-6550 SPANDERSORG